


De intensieve uitwisseling van ervaringen met deskundigen maakt het ziekenhuisbed Avanta tot een voorloper voor belangrijke technische oplossingen. Hierbij werd een gedegen techniek met elegant, aangenaam design gecombineerd. Met een duidelijke vorm en met vele kleurcombinaties brengt Avanta nieuwe elegantie in het ziekenhuis.



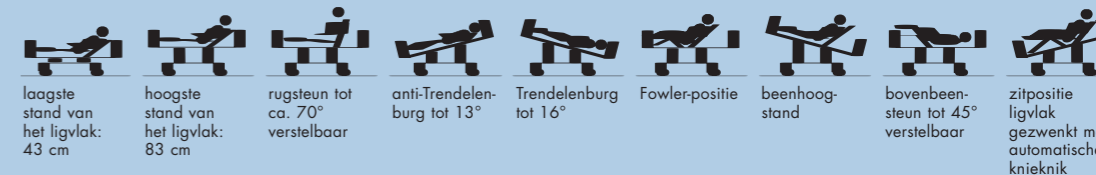

laagste stand van het ligvlak: 43 cm

hoogste stand van het ligvlak: 83 cm

rugsteun tot ca. 70° verstelbaar

anti-Trendelenburg tot 13°

Trendelenburg tot 16°

Fowler-positie

beenhoogstand

bovenbeensteun tot 45° verstelbaar


zitpositie ligvlak gezwenkt met automatische knieknik

Eenvoudig bedden opmaken.
Dekendrager.

Hoogste comfort.
Vele verstelmogelijkheden van het ligvlak – tot aan de buitengewoon comfortabele zitpositie met automatische knieknik – ondersteund door de teruglopende rugsteun.

Veilige zijkanten.
Avanta is met gedeelde zijhekken, zonder zijhekken alsook met doorlopende zijhekken met drie balken leverbaar. Hiermee beantwoordt Avanta aan het BfArM-advies voor de fixatie van patiënten.

Snelle toegang tot de patiënt.
Uitneembaar hoofd- en voeteneindbord.

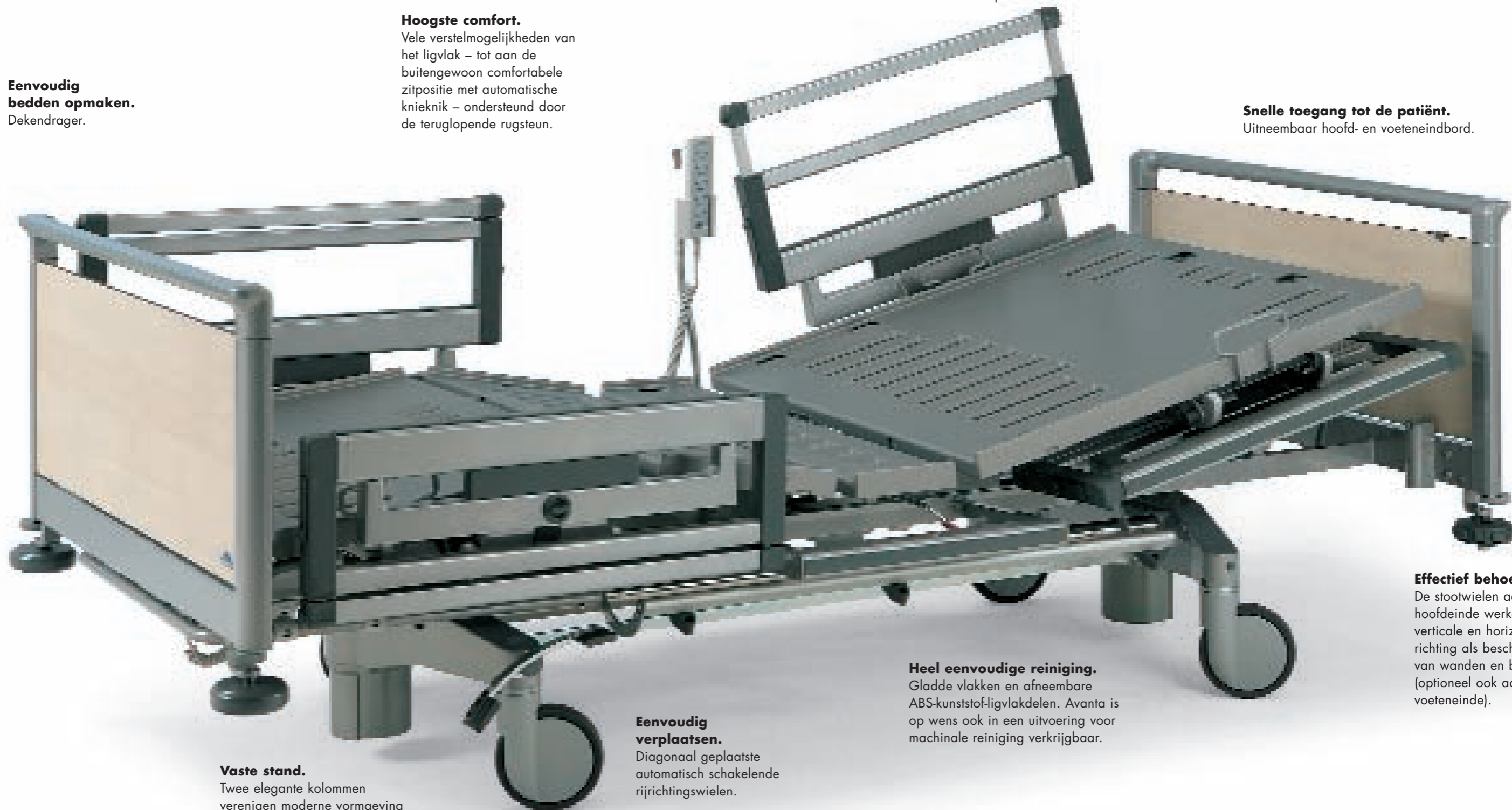


Vaste stand.
Twee elegante kolommen verenigen moderne vormgeving en een hoog verstelbereik met optimale stabiliteit.

Eenvoudig verplaatsen.
Diagonaal geplaatste automatisch schakelende rijrichtingswielen.

Heel eenvoudige reiniging.
Gladde vlakken en afneembare ABS-kunststof-ligvlakdelen. Avanta is op wens ook in een uitvoering voor machinale reiniging verkrijgbaar.


Effectief behoedzaam.
De stootwielen aan het hoofdeinde werken in verticale en horizontale richting als bescherming van wanden en bedden (optioneel ook aan het voeteneinde).

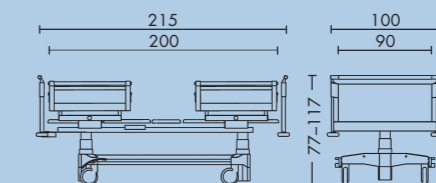

EFFICIËNTIE

van de zorg

Hoogste kwaliteit in de verzorging van de patiënt. Het functioneel design van Avanta helpt het ziekenhuispersoneel bij het dagelijkse werk.

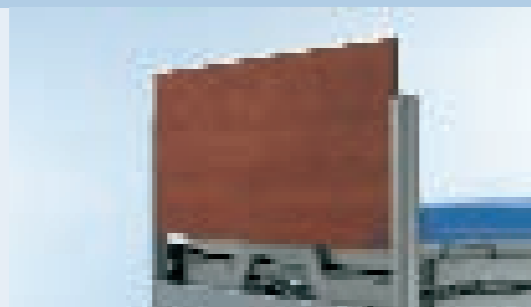

Flexibel. Afneembare hoofd- en voeteneindborden vereenvoudigen de verzorging van de patiënt en kunnen als reanimatiehulp worden ingezet.



Voor ieder gebruik geschikt. De gedeelde zijhekken zijn een ideale mobilisatiehulp. Afzonderlijk kunnen ze onder het ligvlak worden gezwenkt en zijn voor een verhoogd ligstelsel tot 44 cm uitschuifbaar.



Uniek. De doorlopende, omlaag te brengen zijhekken zijn in de hoofd- en voeteneindborden geïntegreerd. Hun gebruik vervult bij de fixatie de adviesrichtlijnen van de BfArM.



Praktisch. Aan weerszijden aangebrachte multifunctionele houders voor een snel en gemakkelijk aanbrengen van verzorgingselementen.



Hygiënisch. De afneembare vierdelige ABS-kunststof-ligvlakdelen zijn eenvoudig te reinigen en vereenvoudigt de toegang tot de elektromotorische aandrijvingscomponenten.

TECHNIEK

die meer presteert

Een bijzonder pluspunt van Avanta is de veelzijdige instelmogelijkheid. De elektromotorische verstelling bespoedigt werkprocessen en verhoogt het comfort. Gelijktijdig garandeert Avanta een maximum aan stabiliteit en zekerheid.



Onafhankelijk. Via elektromotorische verstelmogelijkheden kan de patiënt zelfstandig per handset de ligvlakken van het bed in de meest comfortabele positie brengen.



Controleerbaar. Het geïntegreerde bedieningspaneel waarborgt een eenvoudig bedienen van het bed.*


Veilig. Blokkeerunit voor de selectieve vergrendeling van de elektromotorische verstelfuncties.



Mobiel. Op mooie integrale wielen met automatische rijrichting laat Avanta zich optimaal verplaatsen. Centrale vergrendeling van de wielen met optimaal te bereiken rempedaal.



Toonaangevend. De bedverlenging met geïntegreerde onderbeensteunverlenging verzekert ook in uitgeschoven toestand de volle werking van het ligvlak.

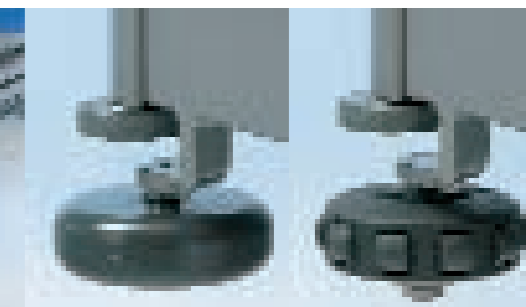


Beschermd. De stootwielen. Aan het hoofdeinde ook verticaal werkend, beschermen zowel de wanden als het bed.

DESIGN

voor het welzijn

Welzijn is een effectieve succesfactor bij het genezingsproces. Avanta verbindt techniek en design tot een eigen, moderne stijl. Een duidelijke vormgeving is het zichtbare handelsmerk van Avanta.

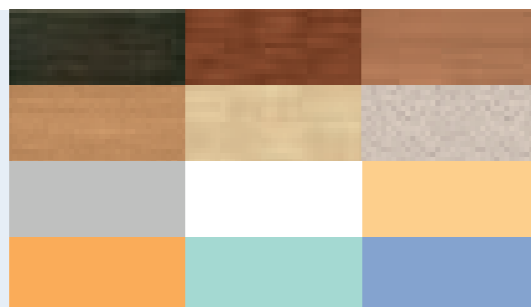


Kleurrijk. Naar keuze is er een aantrekkelijke verscheidenheid aan kleuren bij hoofd- en voeteneindborden in combinatie met de framekleuren van de bedden in argenteum en kristalwit.**



Individueel. Fraaie vormgeving – eenvoudige reiniging. Grote, gladde vlakken en ruim kleurenassortiment vormen het design van de hoofdborden van de Avanta Plus.



Modern. Avanta classic in strak design. Naar keuze met gedeelde zijhekken of met separate doorlopende zijhekken of ook zonder zijhekken.

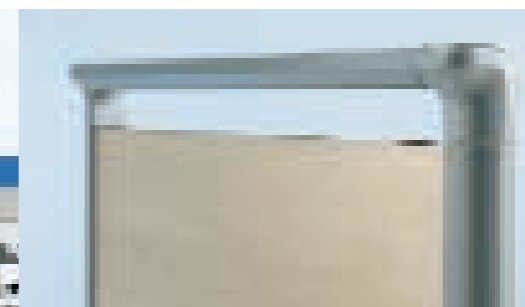

Handzaam. Design tot in de details. Het hoofd- en voetebord van de Avanta is naast de ergonomisch gevormde greeplijst ook met ronde buizen uit roestvrij staal leverbaar.



Personeelsvriendelijk. Functioneel design. Grote bodemvrijheid en gladde vlakken verminderen de inspanning tijdens het reinigen.